




05 - COMPONENTES:

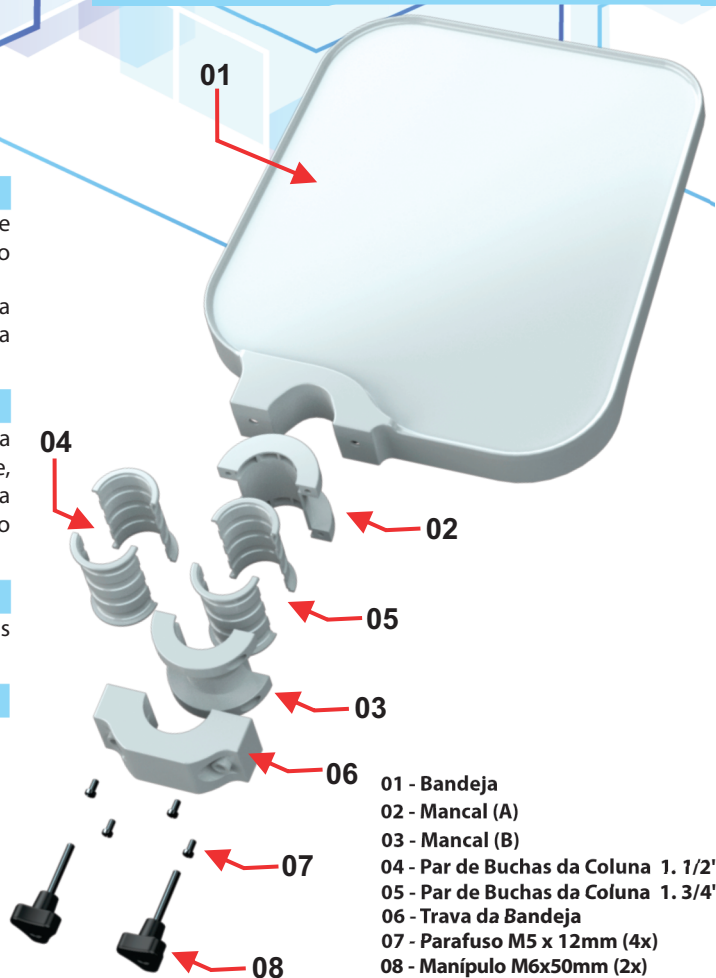

- 01 - Bandeja
- 02 - Mancal (A)
- 03 - Mancal (B)
- 04 - Par de Buchas da Coluna 1. 1/2"
- 05 - Par de Buchas da Coluna 1. 3/4"
- 06 - Trava da Bandeja
- 07 - Parafuso M5 x 12mm (4x)
- 08 - Manipulo M6x50mm (2x)

01 - AVISO LEGAL:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

02 - ATENÇÃO:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

03 - APLICAÇÃO:

Bandeja para acomodar os instrumentais, materiais entre outros periféricos utilizados pelos profissionais da área da saúde.

04 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Utilizada na coluna do refletor,
- fácil de instalar e limpar.
- Feito em plástico de engenharia, resistente e durável.
- Borda para evitar que o instrumental caia e ajudar na retenção de líquidos.
- Pode ser instalado em qualquer refletor odontológico.
- Montagem ajustável para diferentes tipos de cadeiras odontológicas, em colunas nas medidas de 1.1/2" = (38,10 mm) , 1.3/4" = 44,45 e 2" = (50,80 mm).
- Permite movimentos giratórios de 360°.
- Não danifica a pintura da coluna.


06 - INSTALAÇÃO:

Selecione o tipo de bucha da coluna de acordo com o diâmetro da coluna do refletor onde vai ser instalado.

Buchas da Coluna - 1. 1/2" (38,10mm) ou 1. 3/4" (44,45mm).

Para o a coluna com diâmetro de 2" (50,80mm) **instalar sem as buchas.**


01 - Encaixe as buchas selecionadas na coluna do refletor

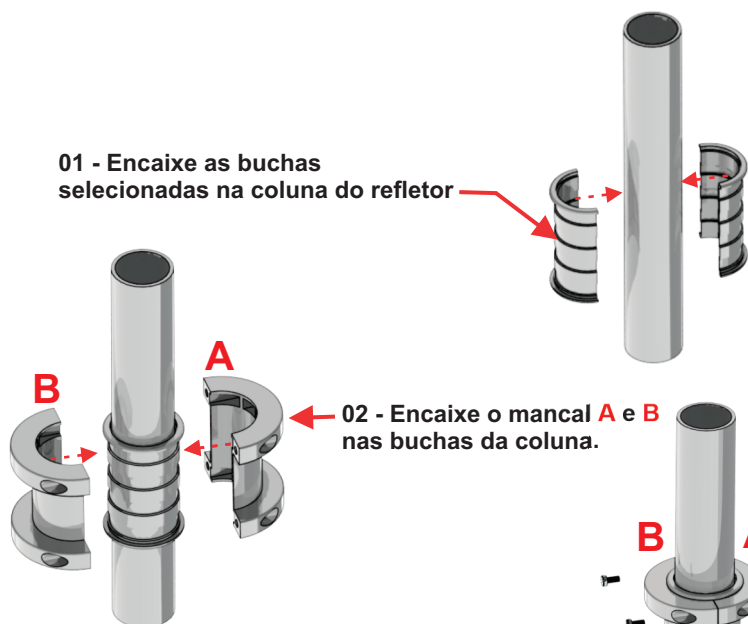

02 - Encaixe o mancal A e B nas buchas da coluna.

03 - Coloque os 4 parafusos M5 no mancal B e aperte com uma chave philips / fenda até a bucha não se movimentar na coluna.

04 - Encaixe a bandeja e sua trava no corpo do mancal

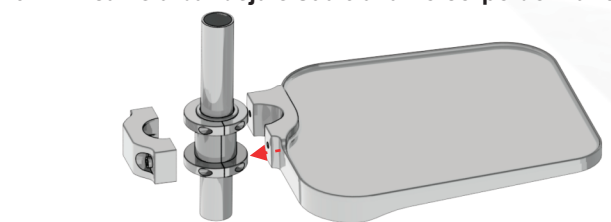


05 - Coloque os 2 Manipulos nos furos da trava, apertando-os simultaneamente no sentido horário até o final das roscas da bandeja (Sem excesso)



Atenção

O excesso de aperto nos parafusos pode danificar a bandeja

06 - Para a coluna com diâmetro de 2" (50,80mm) **instalar sem as buchas.**

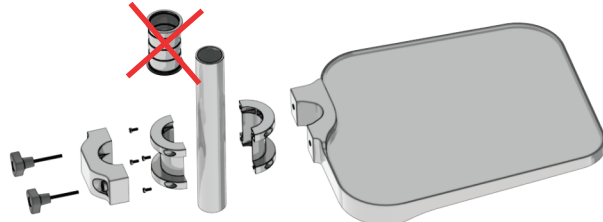

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato. Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:
E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

TERMO DE GARANTIA:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A GARANTIA DA ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE CASO:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

ITENS EXCLUDENTES DE GARANTIA:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo: Bandeja de Coluna Giratória

Peso líquido: 1,300kg

Peso bruto: 1,400kg

Material: ABS

Dimensão:

