



Manual de Instruções

Aquecedor de Toalhas

12 Litros

Aviso Legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir o AQUECEDOR DE TOALHAS da ESSENCE DENTAL. Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

Utilizado para aquecer e umidificar toalhas

Pode ser usada essência aromatizante na água para aromatizar as toalhas

Características e benefícios:

Bivolt Automático.

Consumo de Energia: 1000W PARTIDA / 200W ESTABILIZADA

Ajuste de temperatura de 0° a 90°C.

Capacidade 12 litros aproximadamente 10 Toalhas.

Aviso luminoso do nível de água.

Pintura eletrostática.



Pode ser fixado na parede

Componentes:

Fotos meramente ilustrativas.



Furos Para Fixação Na Parede

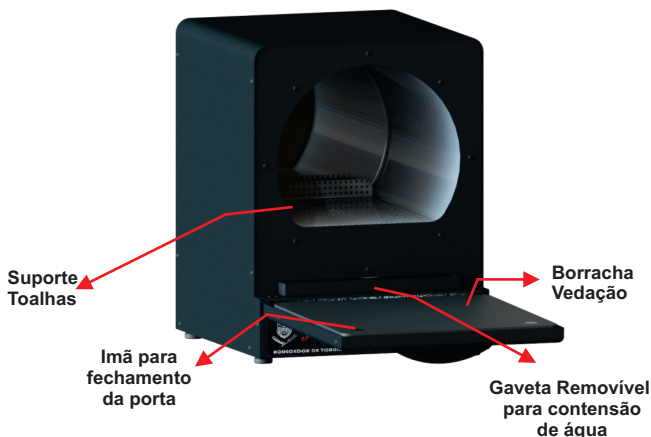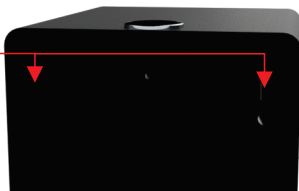

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

1º passo: Instale o seu AQUECEDOR DE TOALHAS em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar) ou fixado na parede em temperatura ambiente, ventilada e em altura adequada para manuseio a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

2º passo: Conecte o cabo de energia, na rede elétrica. o AQUECEDOR DE TOLHAS e Bivolt automático

3º passo: ligue a chave liga desliga e abasteça com água abrindo a porta e levante o suporte de toalhas, coloque a água no fundo do reservatório ate o luz indicadora nível da água apagar (aproximadamente 500ml de água)

4º passo: Regule a temperatura desejada pelo botão de regulagem de temperatura, **(temperatura media de uso 70° a 80° essa regulagem variar de acordo com o padrão de temperatura de cada usuário ou cliente)**

5º passo: Umedeça a toalha e torça ate escorrer toda a água enrole ou dobre e coloque sobre o suporte de tolhas (o primeiro ciclo de aquecimento para a toalha chegar na temperatura ideal demora aproximadamente 1 hora.

6º passo: Assim que a luz indicadora nível da água acender abastecer com água abrindo a porta frontal, levante o suporte de toalhas e absteça ate o luz apagar (aproximadamente 500ml de água)

ATENÇÃO

ANTES DE COLOCAR A TOALHA NO ROSTO CLIENTE FAZER O TESTE DE TEMPERATURA NO ANTEBRAÇO PARA CERTIFICAR QUE A TOALHA NÃO ESTE MUITO QUENTE.

ASSIM QUE A LUZ INDICADORA NÍVEL DA ÁGUA ACENDER ABASTECER COM ÁGUA ATE O LUZ APAGAR

FALTA DESSE ABASTECIMENTO PODE OCASIONAR DANOS AO EQUIPAMENTO.

ESVAZIE A GAVETA PARA CONTENSÃO DE ÁGUA REGULAMENTE OU A CADA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÁGUA NO AQUECEDOR DE TOALHAS.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de distância de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de 06 meses. Sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e os 3 últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL não terá validade caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma;
- O número de série no equipamento seja alterado, apagado, removido ou tornado ilegível;
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL;
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis;
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo;
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens excludentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lâmina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: AQUECEDOR DE TOALHAS 12 Litros

Peso líquido: 6,300Kg

Peso bruto: 7Kg

Tensão: BIVOLT

Frequência: 50/60 Hz

Consumo: 1000W PARTIDA / 200W ESTABILIZADA

Dimensões: 31cm Comprimento

25cm Largura

35cm Altura