

# Molde para Êmbolo

## Instruções de uso

1



Encaixe o molde na base

2



Preparar 50 gramas revestimento em espátulador a vácuo e verter nos 5 orifícios do molde ate transbordar

3



Coloque o molde em um vibrador de gesso para remover as bolhas

4



Remova o excesso de revestimento com uma espátula

5




Verifique se o orifício  
não este entupido

6



Coloque a tampa no molde

7

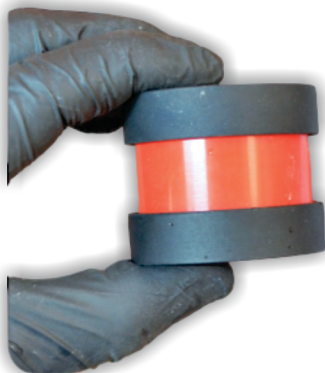

Mantenha o Molde fechado  
ate a secagem do revestimento

8



Para retirar o embolo do molde  
empurre com o dedo indicador

9



E puxe pela outra extremidade  
02

10



Pode ser necessário lixar a borda  
c/ uma lixa fina para quebrar os cantos