

essence[®]
dental
A essência do sorriso



Manual de Instruções

Negatoscópio Slim Led

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL, ficando a seu critério fazer alterações às especificações e atributos deste manual sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou talvez de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

·Para auxiliar o uso deste produto, leia o Manual do Usuário com atenção.

Para informações relacionadas ao produto, acesse nosso site:

w w w.essencedental.com.br

Introdução:

Agradecemos por ter optado por um produto ESSENCE DENTAL.

O rigoroso controle de qualidade e projeto a que são submetidos os nossos produtos antes de seu lançamento garantirão uma grande satisfação durante muito tempo. A ESSENCE DENTAL, com seus produtos, oferece aos seus clientes o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente as informações e instruções de uso contidas neste manual a fim de evitar o uso inadequado, o que pode ocasionar acidentes e danos ao equipamento.

Após leitura e entendimento, guarde o manual juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.


Aplicação:

Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas.

Características e benefícios:

- Dois suportes para fixação de radiografia;
- O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua;
- Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois o próprio material já é um isolante;
- Iluminação a led proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, além de proporcionar maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo;
- Lupa Cristal com aumento de até 3,5x;
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:

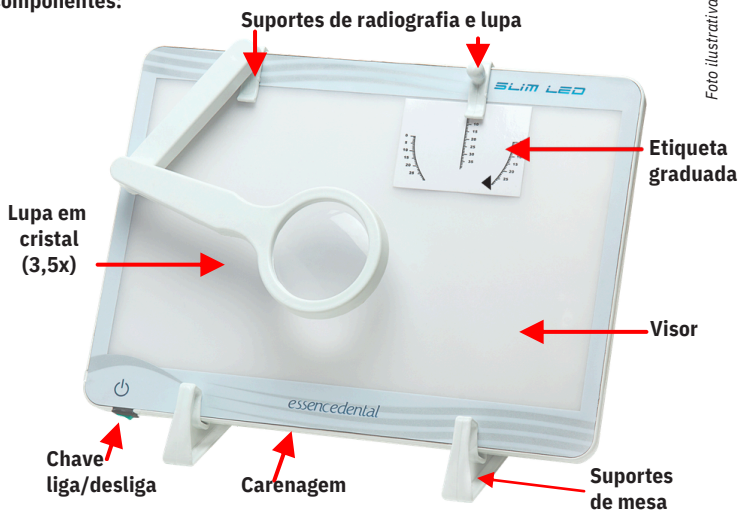

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Ligue a fonte no NEGATOSCÓPIO.



E conecte a fonte na tomada da rede elétrica.

Obs.: Equipamento bivolt automático, não necessita manualmente.

trocar a voltagem

Funcionamento:

Acione a chave liga/desliga para utilizar o NEGATOSCÓPIO.

O mesmo pode ser utilizado das seguintes maneiras.

Em pé: Utilizado em cima de mesas, equipos, bancadas, etc.

Deitado: Possui boa angulação para traçagem, por ser ergonômico tem boa visualização sem causar stress físico;

Fixado à parede: fundo com dois orifícios para fixação.

(Obs. Os parafusos para fixação não acompanham o produto).



Conselhos

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento, ao menos, a 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desplugar da tomada, puxe pela fonte e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar – se a superfícies quentes.

Manutenção e limpeza

- Desligue o equipamento da chave e da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Iluminação não liga	Falta de energia	Verifique se a tomada tem energia
	Chave liga/desliga	Verifique se a chave liga/desliga está acionada
	fonte	Verifique se a fonte está ligada na tomada e no negatoscópio
	Led queimado	Encaminhar assistência técnica

Termo de garantia

Se por acaso, este produto apresentar algum problema, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças que apresentarem defeitos de fabricação, independente da cidade em que o produto estiver durante o prazo de 12 meses a partir da data de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL se aplica desde que o produto seja devidamente manuseado para seu uso e aplicação indicada, de acordo com as instruções de uso e sob a apresentação da nota fiscal ou recibo de compra indicando a data da compra, o nome do revendedor e o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do produto, independente da maneira a ser enviada, via correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio são de responsabilidade do usuário, tanto para conserto em garantia ou fora da garantia.

A garantia da ESSENCE DENTAL não se aplicará, caso:

- Os documentos forem alterados ou ilegíveis de alguma forma;
- O número de fabricação no produto for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível;
- Defeitos ou danos resultantes do uso do equipamento de outro modo que não o especificado no respectivo manual;
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistência técnica não autorizada pela ESSENCE DENTAL;
- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento (lâmpada, refil, filtros de pano, luvas, eletrodos, armalon, disco de corte, chave liga/desliga, fusível, etc.);
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual;
- Defeitos ou danos causados por queda do equipamento, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo, uso indevido ou negligência.

Assistência Técnica

Caso o seu produto ESSENCE DENTAL não estiver funcionando corretamente ou for defeituoso, entre em contato com seu revendedor.

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, leia com muita atenção todas as instruções que se encontram neste manual antes de contatar o seu revendedor.

No caso de dúvida relacionada ao produto ou conserto, que o seu revendedor não possa esclarecer, entre em contato com a ESSENCE DENTAL, através do telefone, e-mail ou nosso endereço eletrônico.